

4T MEDICAL

Sodyum Sitratlı Steril PRP (Plateletten Zengin Plazma) Kan Seperasyon Kitleri

SODYUM SİTRATLI KAN ALMA TÜPÜ MODELİ

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

Referans No: OM-MD-0001

ÜRÜN VE KULLANIM AMACI

Kan Seperasyon Kitleri, hastanın kendi kan bileşenlerinin santrifüj cihazı kullanılarak yoğunluklarına göre ayrışmasını sağlamakta kullanılan ürünlerdir. Tüp içeriğindeki antikoagülan (sodyum sitrat %3.13) sayesinde alınan kan örneği pıhtılaşmadan daha kaliteli PRP elde etmeyi sağlamaktadır. PRP, klinik doğrultuda yumuşak ve sert dokuya lokal olarak uygulanabilmekte ve bu sayede PRP ile dokuların uyarılmasına ve hasarlı dokuların daha hızlı iyileşmesine olanak sağlamaktadır.

ÜRÜN İÇERİĞİ

1 adet 10 ml Sodyum Sitratlı (1ml) Vakumlu tüp

ÜRÜN PERFORMANS VE KLİNİK BİLGİSİ

PRP tedavisi, kemik ve yumuşak dokuların iyileşmesi için plateletten zengin plazmanın hastaya tekrar enjekte edilmesiyle gerçekleşen bir olog tedavidir. Bu süreçte hastadan alınan kanın pıhtılaşmaması için literatüre göre kabul edilen yöntem antikoagülan (sodyum sitrat) kullanımudur. Antikoagülasyon ise hastadan alınan kan ile sodyum sitratın karışımı işlemidir. Tüpteki kan santrifüj cihazı kullanılarak ayrıştırma işlemi uygulanır ve PRP katmanı kullanıcı tarafından alınır. Klinik Değerlendirme Raporları ve Risk Analiz Raporlarıyla ürünün klinik olarak etkili ve güvenli olduğu belirtilmiştir.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

- Kitler her hastaya özel ve tek kullanımlıktır.
- Medikal uygulamalar içindir. Başka amaçlarla kullanılmaz.
- Yalnızca medikal lisansa sahip doktorlar tarafından kullanılmalıdır.
- Son kullanım tarihi geçmiş ürünler kullanılmamalıdır.
- Açılmış ve hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.
- Kullanılacak santrifüj aletinin kalibrasyonları yapılmış olmalıdır. Sabit açılı santrifüj kullanılacaksa en az 45 derecelik açılımı olan santrifüj kullanılır.
- PPP, PRP ayrıştırıldıktan sonra derhal kullanılmalıdır.
- Vakum kaybı olma ihtimaline karşın numune miktarına dikkat edilmelidir.
- Hasta tedavinin yol açabileceği riskler ve olası yan etkiler hakkında bilgilendirilmelidir.
- Antiinflamatuvar ilaçlar ve kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar için hekim önerisi ile PRP tedavisi uygulanmalı veya uygulanmamalıdır. (PRP tedavi öncesi ve sonrası ilaç kullanımı hakkında)
- Tedavinin yapılacağı gün, öncesi ve sonrası için hekim önerileri dikkate alınmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ VE ENDİKASYONLAR

PRP tedavisi dermatoloji, fizik tedavi, üroloji, jinekoloji, oftalmoloji, çeşitli cerrahi branşlarda (ortopedi, plastik, diş hekimliği ve çene, kalp ve damar) ve saç ekim uygulamaları gibi çeşitli tıbbi uygulamalarda kullanılabilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

1. Kutuyu açınız.
2. Steril blister paketi açınız.
3. Blister paket içerisinde bulunan PRP tüpü ile rutin filebotomi uygulayınız.
4. PRP Tüpü vakumludur. Tüp yeterli miktarda kan aldığından kendiliğinden durur.
5. Her tüpü santrifüj cihazında 850 G'de 8 dakika santrifüj ediniz. Santrifüj hızları tüpler ile uyumlu olmalıdır.
6. Tüplerde PRP hazırlanmış olacaktır.
7. Tüplerde bulunan PRP'yi şırınga yardımıyla çekiniz. Muhtemel hücre kümelenmelerini plazma içinde homojenize etmek için şırıngayı 60 saniye boyunca nazikçe çalkalayınız.
8. Hastaya enjeksiyon metodu ile uygulayınız.

HASTA PROFİLİ

PRP, hekimin onay verdiği kişilere ve hekim kontrolünde uygulanabilen olog bir tedavi tekniğidir. Tedavinin olog olması çeşitli bulaşıcı hastalıkların önüne geçmesiyle bulaşıcılığın önüne geçer ve güvenli bir uygulama sağlar.

KULLANICI PROFİLİ

Cihazın kullanımı hakkında yeterli tecrübeye sahip hekim veya hekimler tarafından kullanılmalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR:

Aşağıdaki durumlardan herhangi birinin varlığında PRP uygulaması önerilmez:

- Trombosit Disfonksiyon Sendromu
- Kritik Trombositopeni
- Hipofibrinojenemi
- Hemodinamik instabilite
- Otoimmün hastalıklar
- Malignansi
- Sepsis
- Akut kronik enfeksiyonlar
- Kronik Karaciğer Patolojisi
- Anti-koagülasyon Tedavisi (ASA tedavisi vb.)
- Hamilelik
- Yeni doğanlar























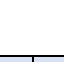
RİSK VE YAN ETKİLER

Ürün üretim aşamasında gerçekleştirilen risk değerlendirme, yönetim ve analiz raporlarına göre uygulama yapılan bölgede geçici ağrı, cilt uygulamalarında geçici morarma veya ödem görülebilir. Bu sebeple uzman olmayan kişi veya kişiler tarafından yanlış şekilde uygulanması ve sterilite koşullarına uyulmaması durumunda çeşitli hasar ve/veya enfeksiyonlar oluşabilir.

RAF ÖMRÜ

Ürünün raf ömrü için ürün üzerindeki son kullanma tarihi geçerlidir.

Kutu Etiketindeki Sembollerin Açıklaması

| NO | SEMBOL | AÇIKLAMA | NO | SEMBOL | AÇIKLAMA |
|----|---|-----------------------------|----|---|--|
| 1 |  | Üretim tarihi | 13 |  | Ambalaj hasarlıysa kullanmayın ve kullanım talimatlarına bakın. |
| 2 |  | Son kullanım tarihi | 14 |  | Güneş ışığından uzak tutunuz. |
| 3 |  | LOT numarası | 15 |  | Kuru muhafaza ediniz. |
| 4 |  | Model adı | 16 |  | Sıcaklık Limitleri 15°C 25°C |
| 5 |  | İthalatçı | 17 |  | Biyolojik riskler |
| 6 |  | Distribütör | 18 |  | Tekrar kullanmayınız. |
| 7 |  | Model numarası | 19 |  | Kullanım kılavuzuna bakın. |
| 8 |  | Üretim ülkesi | 20 |  | Dikkat |
| 9 |  | Etilen Oksit sterilizasyonu | 21 |  | Tıbbi Cihaz |
| 10 |  | Radyasyon sterilizasyonu | 22 |  | Tekil cihaz tanımlayıcı (01) UDI-DI Kodu, (10) Parti Numarası, (11) Üretim Tarihi, (17) Son Kullanma Tarihi |
| 11 |  | Tek steril bariyer sistemi | 23 |  | SZUTEST Test Onaylı Kuruluşun CE Sembolü |
| 12 |  | Tekrar sterilize etmeyiniz. | | | |

| Revizyon | Revizyon | Revizyon Nedeni |
|----------|----------|-----------------|
|----------|----------|-----------------|



Endüstri ve Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

KULLANIM KILAVUZU – SODYUM SİTRATLI KAN ALMA TÜPÜ

Doküman No

TD.01.124-21

Yayın Tarihi

03.03.2023

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi

-

| No | Tarihi | |
|----|------------|-----------|
| 00 | 03.03.2023 | İlk Yayın |

FİRMA BİLGİLERİ:



Endüstri ve Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi

ÜRETİCİ: KAIZEN ENDÜSTRİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Bostancı Mah. Gönen O.S.B. 3 Nolu Cad. No:1 Gönen – BALIKESİR/TÜRKİYE

Tel: +90 266 762 39 39

Email: info@kaizenendustri.com

Website: <http://www.kaizenendustri.com/>